

Treppenkuli Stairmax

STAIRMAX ist eine einzigartige und kostengünstige mobile Lifthilfe für aktive Rollstuhlfahrer, die ein Befahren von geraden Treppen mit Absatz (Podest) im eigenen Rollstuhl ohne fremde Hilfe ermöglicht. Sämtliche Funktionen ergeben sich durch Einziehen und Ausfahren des Raupenantriebes unter dem adaptierten Rollstuhl. Das Wenden am Podest erfolgt einfach mit den Antriebsrädern des Rollstuhles. Optische und bauliche Veränderungen im Treppenhaus sind nicht notwendig - daher auch keinerlei Genehmigungen erforderlich.


Jeder aktive Rollstuhlfahrer findet einen sicheren und zuverlässigen Partner mit dieser batteriebetriebenen Lifthilfe. Der technische Aufbau und die Bedienung sind einfach. Sicherheit war bei der Konstruktion oberstes Gebot. Traglast: 130 kg

The STAIRMAX is a unique and cost saving mobile lifting aid for active wheelchair drivers, which enables them to ride up straight stairs with landing in their own wheelchair without outside help. All functions can be carried out by means of pulling in and pulling out the track-laying device underneath the adapted wheelchair. Turning round on the landing is achieved by means of the drive wheels.

No optical and architectural changes in the staircase have to be made - thus eliminating the need for building permits.

Every active wheelchair driver will find a safe and reliable partner in this battery-run lifting device.

Capacity: 130 kg

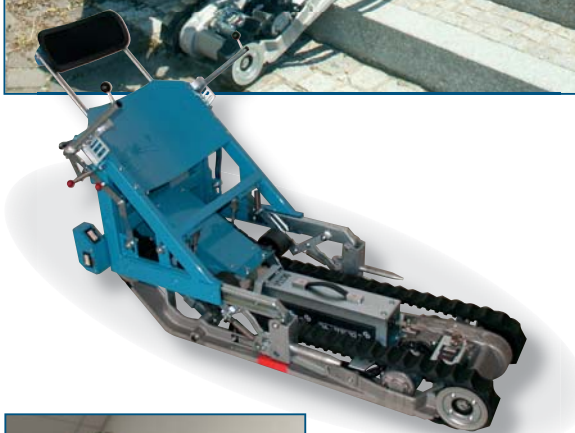


Treppen Trans / Stair Chair

Der Treppen Trans ermöglicht gehbehinderten Menschen mit Schwierigkeiten auf Stufen das problemlose Überwinden von Treppen. Geführt von einer Hilfsperson erklettert der Treppen Trans mühelos gerade Treppen bis zu 35°.

The Stair Chair provides easy ride up and downstairs to people who are handicapped in climbing stairs. Guided by only one person Stair Chair climbs straight stairs up to a max. stair angle of 35°.

Vorteile / Benefits

Minimale Treppenmaße:
Minimum stair dimensions:

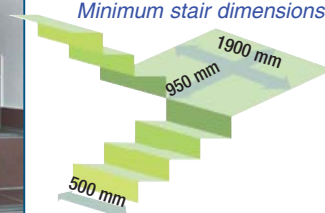

- mobil einsetzbar
mobil to be used at various stairs
- platzsparend zusammenlegbar
collapsible - small enough for nearly any trunk
- ideal für Altenheime, Krankenhäuser oder den privaten Gebrauch
ideal for old people homes, hospitals or private use



capacity	Traglast	kg	110
measurements	Maße L x B x H	mm	1321 x 415 x 908
measurements collapsed	Maße zusammengelegt	mm	1080 x 415 x 510
weight	Leergewicht	kg	59
speed upstairs	Geschwindigkeit	aufwärts	7,7 m / min.
downstairs		abwärts	11,9 m / min
stair angle max.	Treppensteigung	max.	35°
magnetic brake	Magnet-Bremse		elektromagn.
battery	Batterie	inkl.	1 x 12 V / 17 Ah
battery capacity	Fahrzeit/Batterie-Ldg.	min.	180 m aufwärts upstairs
accessories:	Zubehör:		
autom. charger	autom. Ladegerät		12 V / 2,5 A

