



Treppenkuli Public /Stairmate Major

einzigartig auf der Welt!
not to compare to anything all over the world!

Batterie-Antrieb

Der Antrieb wird durch 24 V wiederaufladbare Batterien versorgt.

Battery Powered

Power is provided by 24 volt rechargeable battery for complete portability.

Lastplattform

Die große Lastplattform ist für alle Rollstuhlmodelle - auch Sportrollstühle - geeignet.

Platform


Large platform accommodates virtually any wheelchair, including electric models and sport chairs.

Rollstuhl-Sicherungsgurte

Der Rollstuhl wird durch vier Sicherungsgurte fest in Position gehalten.

Wheelchair Tie-Down Straps

Wheelchair is securely attached to platform with 4 adjustable tie-down straps.

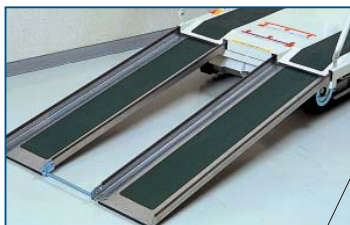

Laderampe

Die integrierte Laderampe mit rutschfester Oberfläche ermöglicht leichtes Auffahren.

Loading-Ramp

An integrated loading ramp with non-skid surface makes wheelchair boarding easy.

Sicherheitsgurt

Elektrisch einrastender Gurt zur Sicherung der Passagiere. Der Treppenkuli Public kann nur fahren, wenn der Gurt geschlossen ist.

Seat Belt

Electrically interlocked seatbelt provides additional passenger security. Stairmate Major will not operate unless seatbelt is fastened.

Kopfstütze

verstellbar.

Headrest

Adjustable for passenger comfort.



Bedienpult

Einfach arbeitende Bedienschalter inkl. Batterie-Entladekontrolle und Schlüsselschalter nur für autorisiertes Bedienpersonal.

Control Panel

Simple operating controls include a battery charge indicator and a key switch to prevent unauthorized use.

Fahrrollen

Die Räder erlauben leichtes Verschieben auf Treppenabsätzen oder Fluren.

Auxiliary Wheels

Wheels allow easy travel across landings and between flights of stairs.

Raupenbänder

Die Gummi-Raupenbänder sind durch Stahlkörper verstärkt und langlebig. Sie greifen an allen Arten von Treppen unterschiedlichsten Materials

Tracks

Rubber tracks are steel-reinforced to ensure strength and durability. The unique tread design grips all types of stair designs and materials.



Hydraulischer Hub

Eine kraftvolle Hydraulik bringt die Ladeplattform in die für die Treppenneigung richtige Position.

Hydraulic Leveling

A powerful hydraulic piston adjusts the wheelchair platform position for travel on the stairs.




Standbremse

Die elektrisch wirkende Standbremse gibt beim Auffahren über die Laderampe sicheren Halt.

Parking Brake

Electrically activates parking brake ensures stability during boarding.

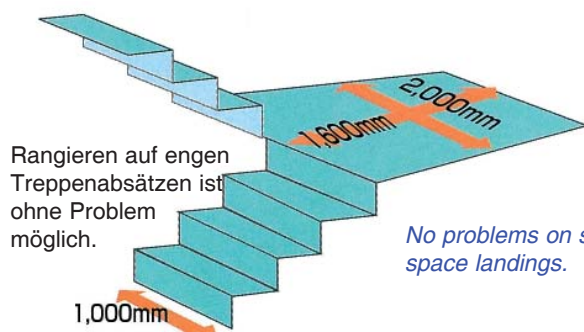

Rangieren auf engen Treppenabsätzen ist ohne Problem möglich.

No problems on small space landings.

